


01.

ATTACCHI ASSIALI

PRECI-BALL
ITALIANO

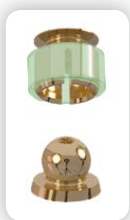

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PRECI-BALL

UN ATTACCO CON OPZIONI

- 1** **Saldare** la patrice sulla cappetta radicolare.
Questa tecnica unisce precisione ed una accuratezza affidabili ad un costo ridotto.



- 2** **Sovrapporre** la patrice con leghe preziose oppure incorporare un'anello di base con una patrice sostituibile.
Tecnica raccomandata per associare precisione e servizio.



- 3** **Fondere** solo con leghe dure.
La soluzione più economica.
Usare la fresa cava PRECI-BALL per rifinire la bola.



Scaricare la cappetta radicolare con il grande mantenero di spazio in stagnola fornito.
RA 0055

PRECI-BALL OR/OR

1201



A: 3,5 mm

Matrice in ORAX da inglobare nella resina



1201 A
1201 AB

1 matrice
20 matrici

Patrice in ORAX da saldare sulla cappetta radicolare



1201 C

1 patrice

PRECI-BALL PC

1205



A: 3,5 mm

Matrice in TITANAX da inglobare nella resina



1205 A
1205 AB

1 matrice
20 matrici

Patrice in plastica calcinabile da fondere con la cappetta radicolare



1205 C
1205 CB

1 patrice
50 patrici

PRECI-BALL CV

1206



A: 4,3 mm

Matrice in ORAX da inglobare nella resina



1201 A
1201 AB

1 matrice
20 matrici

Patrice in TITANAX da avvitare nell'anello di base



1206 C

1 patrice

Anello di base in IRAX per sovrapposizione con leghe preziose ed a base di palladio



RA 0063

1 anello di base

PRECI-BALL OR/IR

1209



A: 3,5 mm

Matrice in ORAX da inglobare nella resina



1201 A
1201 AB

1 matrice
20 matrici

Patrice in IRAX per sovrapposizione con leghe preziose



1209 C

1 patrice

**ACCESSORIO PER L'ATTIVAZIONE**

1220

1 pezzo

**ACCESSORIO PER LA DISATTIVAZIONE**

1221

1 pezzo

**CACCIAVITE PER LA PATRICE FILETTATA**

IMP-XS-042

1 pezzo

**MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO
PER LA PATRICE**

1201 P

1 pezzo

**MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO
PER LA MATRICE**

1211 P

1 pezzo

**MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO
PER L'ANELLO DI BASE**

RE P 4

1 pezzo

**FRESA CAVA**

1230

2 pezzi

Fresa per rifinire la matrice 1205 C

**ANALOGO PER MODELLO**

1201 D

2 pezzi

**PATRICE V CON ESAGONO ESTERNO**

1206 CL

1 pezzo

Matrice speciale di titanio con filettatura allungata di 0,3 mm

**CEKA BOND**

CB1

5 ml

Adesivo anaerobico per prevenire il graduale svitamento dei componenti protesici

PRECI-BALL

UN ATTACCO UNIVERSALE

*Diametro della patrice
sferica di 2,25 mm*



Il diametro di 2,25 mm della patrice sferica del PRECI-BALL è compatibile con la maggior parte dei sistemi di impianti. Combinare con gli abutment a sfera della società di impianti.



La patrice può essere incorporata nella barra.



La matrice PRECI-BALL è anche disponibile in una confezione di 20 pezzi per migliori condizioni economiche.



Il sistema PRECI-BALL è intercambiabile con PRECI-CLIX (vedi il prospetto PRECI-CLIX).

TABELLA DELLE LEGHE

ORAX - Giallo - Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13

Intervallo di fusione: 910-955 °C

TITANAX - Bianco - Ti 90 - Al 6 - V 4 (Non riscaldare!)

IRAX - Bianco - Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

Intervallo di fusione: 1400-1460 °C

CEKA ASSIALE
PRECI-CLIX ASSIALE
PRECI-CLIX RADICOLARE
PRECI-BALL

01.
**ATTACCHI
ASSIALI**

CEKA EXTRACORONALE
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
**ATTACCHI
EXTRACORONALI**

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
**ATTACCHI
PROFILATI**

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPEZIALITÀ

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospetto no. **267.1-ed.C**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

T+32 56 629 100 - **F**+32 56 629 101 - **E**info@ckpl.eu

