


01.

AXIALE ATTACHEMENTEN

PRECI-BALL
NEDERLANDS

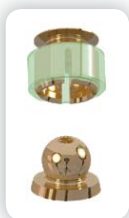

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PRECI-BALL

EEN ATTACHEMENT MET MOGELIJKHEDEN

- 1** **Soldeer** de patrix op de stiftwortelkap.
Zo combineert u uiterste precisie met een nauwkeurige verwerking voor een voordelige prijs.



- 2** **Giet** de patrix in een edelmetaallegering of gebruik een basising met uitschroefbare patrix. Aanbevolen techniek om precisie met nazorg te combineren.



- 3** **Giet** in een harde dentaallegering.
Dit is de voordeligste oplossing.
Werk de patrix af met de PRECI-BALL-holfrees.



Ontlast de stiftwortelkap met de meegeleverde grote plaatshouder.
RA 0055

PRECI-BALL OR/OR

1201



H: 3,5 mm

Matrix in ORAX, om in de kunststof te verankeren



1201 A

1 matrix

1201 AB

20 matrixen

Patrx in ORAX, om op de stiftwortelkap te solderen



1201 C

1 patrx

PRECI-BALL PC

1205



H: 3,5 mm

Matrix in TITANAX, om in de kunststof te verankeren



1205 A

1 matrix

1205 AB

20 matrixen

Patrx in restloos verbrandbare kunststof, om mee te gieten met de stiftwortelkap



1205 C

1 patrx

1205 CB

50 patrxen

PRECI-BALL CV

1206



H: 4,3 mm

Matrix in ORAX, om in de kunststof te verankeren



1201 A

1 matrix

1201 AB

20 matrixen

Patrx in TITANAX, om in de basisring te schroeven



1206 C

1 patrx

Basisring in IRAX, om aan te gieten met edelmetaal- en palladiumbasislegeringen



RA 0063

1 basisring

PRECI-BALL OR/IR

1209



H: 3,5 mm

Matrix in ORAX, om in de kunststof te verankeren



1201 A

1 matrix

1201 AB

20 matrixen

Patrx in IRAX, om aan te gieten met edelmetaallegeringen



1209 C

1 patrx



ACTIVEERINSTRUMENT
1220

1 stuk



DESACTIVEERINSTRUMENT
1221

1 stuk



**SCHROEVENDRAAIER VOOR PATRIXEN
MET SCHROEFDRAAD**
IMP-XS-042

1 stuk



PARALLELHOUDER VOOR PATRIXEN
1201 P

1 stuk



PARALLELHOUDER VOOR MATRIXEN
1211 P

1 stuk



PARALLELHOUDER VOOR BASISRINGEN
RE P 4

1 stuk



HOLFREES
1230

2 stuks

Frees om de patrix 1205 C af te werken



MODELANALOOG
1201 D

2 stuks



PATRIX V EXTRA LANG
1206 CL

1 stuk

Speciale titaanpatrix met 0,3 mm langere schroefdraad



CEKA BOND
CB1

5 ml

Anaëroob borgmiddel om spontaan losschroeven van componenten te verhinderen

PRECI-BALL

EEN VEELZIJDIG ATTACHEMENT

*2,25 mm
boldiameter*



Dankzij de boldiameter van 2,25 mm is PRECI-BALL compatibel met de meeste implantaatsystemen. Te combineren met een bolvormig abutment van de implantaatfirma.



De patrix kan in een steeg ingewerkt worden.



De PRECI-BALL-matrix is ook verkrijgbaar in een voordeelverpakking van 20 stuks.



Het PRECI-BALL-systeem is volledig compatibel met PRECI-CLIX (zie PRECI-CLIX-folder).

LEGERINGSTABEL

ORAX - Geel - Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13

Smeltinterval: 910-955 °C

TITANAX - Wit - Ti 90 - Al 6 - V 4 (Niet verwarmen!)

IRAX - Wit - Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

Smeltinterval: 1400-1460 °C

CEKA AXIAAL
PRECI-CLIX AXIAAL
PRECI-CLIX RADICULAIR
PRECI-BALL

01.
AXIALE
ATTACHEMENTEN

CEKA EXTRA-CORONAIR
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
EXTRA-CORONAIRE
ATTACHEMENTEN

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFIEL
ATTACHEMENTEN

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPECIALITEITEN

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospectus nr. **267.N-ed.B**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

T +32 56 629 100 · **F** +32 56 629 101 · **E** info@ckpl.eu

